

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL**Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie
Évaluation des Compétences Expérimentales**

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM :	Prénom :
Centre d'examen :	n° d'inscription :

Cette situation d'évaluation comporte **quatre** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examineur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION

L'acide benzilique est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques, par exemple pour obtenir le bromure de clidinium qui permet notamment de soulager les crampes et les douleurs abdominales.

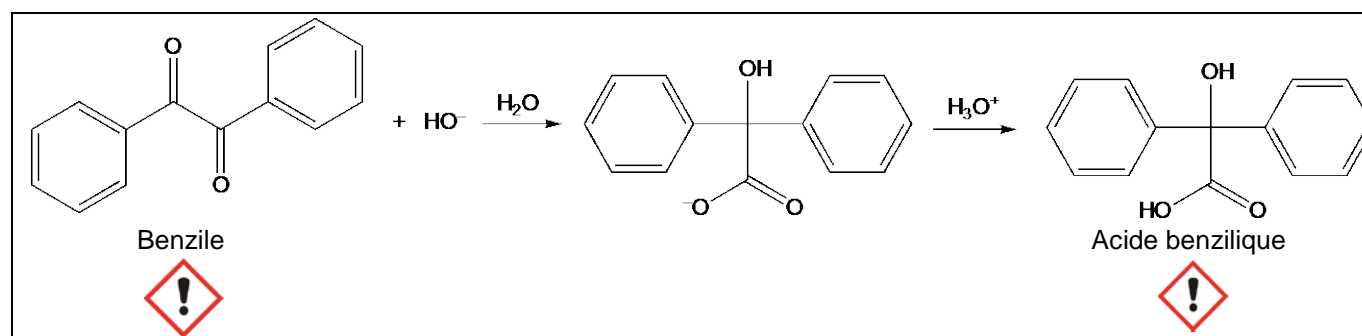
Une partie du protocole expérimental de la synthèse de l'acide benzilique a été mise en œuvre mais pas la totalité. Il s'agit de finaliser la mise en œuvre du protocole afin d'obtenir le produit souhaité.

Le but de cette épreuve est d'isoler l'acide benzilique issu d'une étape de synthèse.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT**Protocole de la première étape de la synthèse**

Le protocole suivant constitue la première étape de la synthèse de l'acide benzilique. Il a déjà été mis en œuvre :

- Dans un ballon monocol de 100 mL, introduire 20 mL de la solution S_0 composée de 12,5 mL d'éthanol, 10 mL d'eau et de 5 g d'hydroxyde de potassium.
- Ajouter 2,8 g de benzile puis un barreau aimanté.
- Adapter sur le ballon un réfrigérant à boules puis porter à reflux.
- Maintenir le reflux pendant 10 minutes.
- Laisser refroidir à température ambiante.

Équation de la réaction de synthèse de l'acide benzilique**Données utiles**

Espèces chimiques	Benzile	Acide benzilique
Solubilité dans l'eau à température ambiante	Très faible	Très faible
Solubilité dans l'éthanol à température ambiante	Grande	Grande
Solubilité dans l'eau glacée	Très faible	Très faible
T_{fusion}	94,8 °C	150 °C

Température d'ébullition de l'éthanol : $T_{\text{éb}} = 78 \text{ °C}$

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Élimination de l'éthanol (20 minutes conseillées)

1.1. À partir des informations mises à disposition, indiquer le rôle de l'éthanol dans la synthèse de l'acide benzilique.

.....

Préciser pourquoi il est nécessaire d'éliminer cet éthanol du contenu du ballon issu de la première étape de synthèse.

.....

.....

.....

1.2. Proposer un protocole expérimental permettant d'éliminer l'éthanol contenu dans le ballon issu de la première étape de synthèse.

.....



.....

.....

Préciser comment savoir quand l'éthanol aura totalement été éliminé.

.....

.....

APPEL n°1		
	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté	

1.3. Mettre en œuvre le protocole proposé.



2. Obtention du solide (20 minutes conseillées)

2.1. Mettre en œuvre le protocole suivant :

- une fois que l'éthanol a été éliminé du ballon, arrêter le chauffage ;
- ajouter 50 mL d'eau distillée dans le ballon afin de bien dissoudre le solide qui y est présent ;
- transvaser le contenu du ballon dans un bécher plongé dans le bain d'eau glacée ;
- ajouter avec précaution environ 20 mL d'une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol·L⁻¹, jusqu'à l'obtention d'un précipité blanchâtre ;
- à l'aide d'un papier pH, vérifier que le pH est inférieur à 2. Si ce n'est pas le cas poursuivre l'ajout de la solution d'acide chlorhydrique.

2.2. L'acide benzilique obtenu à l'issue de l'ajout de l'acide chlorhydrique doit être filtré sur Büchner. Parmi les trois solvants suivants : éthanol, eau et eau glacée, préciser lequel paraît le plus adapté pour le lavage.

.....



APPEL n°2		
	Appeler le professeur pour lui présenter le choix du solvant ou en cas de difficulté	

2.3. Mettre en œuvre le protocole de filtration sur Büchner.

3. Analyse (20 minutes conseillées)

3.1. Mettre en œuvre le protocole de chromatographie suivant :

- dissoudre une pointe de spatule de produit obtenu avec 1 mL d'acétone dans un petit flacon ;
- sur une plaque de silice, faire un dépôt du produit obtenu ainsi que des références de benzile et d'acide benzilique fournies ;
- déposer la plaque de silice dans la cuve qui contient déjà l'éluant ;
- après élution, sécher la plaque et la révéler aux UV.

APPEL n°3		
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté	

3.2. En analysant le chromatogramme obtenu, indiquer s'il faut procéder à une purification du produit obtenu. Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

Défaire le montage et ranger la pailasse avant de quitter la salle.